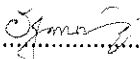


ข้อแนะนำการส่งเครื่องชั่งไฟฟ้าสอบเทียบ

1. ผู้ขอรับบริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอส่งสอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้า
2. ผู้ขอรับบริการส่งคำร้องขอส่งสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานสอบเทียบเครื่องมือ สาขามวล ปริมาตร..... (BQCLP_LQSD_CM_FORM08_01) โดยกรอรายละเอียดในคำร้องฯ ให้ครบถ้วน ส่งให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ที่กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
3. การตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องชั่งไฟฟ้าก่อนส่งคำร้องขอส่งสอบเทียบฯ โดยผู้ขอรับบริการจะต้องเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและสภาวะแวดล้อมของห้องที่เครื่องชั่งไฟฟ้าตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ขอรับบริการต้องเตรียมเครื่องชั่งไฟฟ้าให้พร้อม โดยตรวจสอบการทำงานของเครื่องชั่งไฟฟ้าให้ทำงานได้ปกติ ตรวจสอบระดับลูกน้ำให้อยู่ตรงกลาง และเมื่อกดปุ่ม Tare แสดงค่าศูนย์ (0)
 - 3.2 สภาวะแวดล้อมของห้องที่เครื่องชั่งไฟฟ้าตั้งอยู่ ต้องสามารถควบคุมให้อยู่ในช่วงที่ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือ สาขามวลกำหนด ดังนี้ อุณหภูมิ 20-30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 40-70 %RH และหากสภาวะแวดล้อมระหว่างดำเนินการสอบเทียบเกินเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ขอรับบริการหรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทดสอบ/ สอบเทียบ จะต้องทำการแก้ไขสภาวะแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะดำเนินการสอบเทียบต่อ แต่หากห้องปฏิบัติการไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่สอบเทียบจะหยุดทำการสอบเทียบ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่เครื่องมือเสียกะทันหันในระหว่างดำเนินการสอบเทียบ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง/เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนเข้าดำเนินการสอบเทียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับบริการจะต้องดใช้งานเครื่องชั่งไฟฟ้าและห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องที่เครื่องชั่งไฟฟ้าตั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบเทียบ จนกว่าเจ้าหน้าที่สอบเทียบจะดำเนินการแล้วเสร็จ
5. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ สาขามวล มินิโบบายไม่จ้างเหมาช่วงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่แสดงข้อคิดเห็น ไม่แปลผล และไม่ตัดสินผลการสอบเทียบ

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

วันที่..... 16 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ..... 

(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่..... 16 ก.ย. 2567